


SCHEMA TECNICA

ArtiSential Porta-Aghi con anelli di controllo regolabili

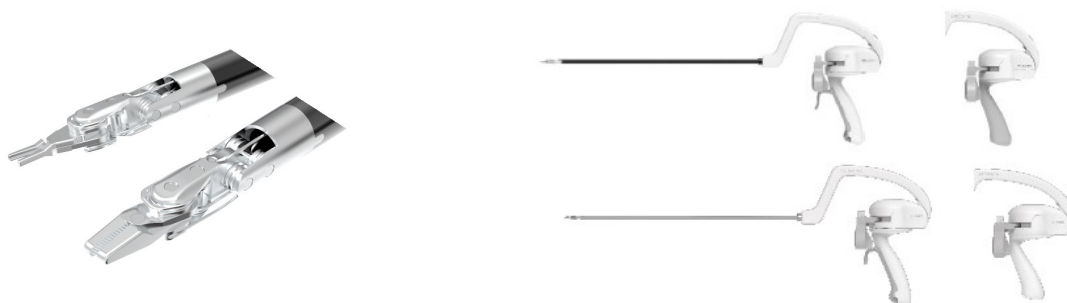

Destinazione d'uso:

Strumenti monouso laparoscopici endoscopici per suturare, utilizzati durante interventi chirurgici per mantenere aghi e confezionare suture nei vari tessuti.

Le procedure indicate sono:


procedure chirurgiche addominali, ginecologiche, urologiche, toraciche, plastiche e ricostruttive, otorino, pediatriche, cardiocirurgiche etc.

Codice	Descrizione			Repertorio DM	CND
ANH01-LV	ArtiSential Porta-aghi ADJ	con-Lock	38cm	2557037	K01020199
ANH01-FV	ArtiSential Porta-aghi ADJ	no-Lock	38cm	2557025	
ANH01S-LV	ArtiSential Porta-aghi ADJ	con-Lock	25cm	2557049	
ANH01S-FV	ArtiSential Porta-aghi ADJ	no-Lock	25cm	2557039	
ANH02-LV	ArtiSential Porta-aghi Precise ADJ	con-Lock	38cm	2557054	
ANH02-FV	ArtiSential Porta-aghi Precise ADJ	no-Lock	38cm	2557051	
ANH02S-LV	ArtiSential Porta-aghi Precise ADJ	con-Lock	25cm	2557060	
ANH02S-FV	ArtiSential Porta-aghi Precise ADJ	no-Lock	25cm	2557057	
5ANH01-LV	ArtiSential5 Porta-aghi ADJ	con-Lock	38cm	2557301	
5ANH01-FV	ArtiSential5 Porta-aghi ADJ	no-Lock	38cm	2557297	
5ANH01S-LV	ArtiSential5 Porta-aghi ADJ	con-Lock	30cm	2557303	
5ANH01S-FV	ArtiSential5 Porta-aghi ADJ	no-Lock	30m	2557309	
5ANH02-LV	ArtiSential5 Porta-aghi Precise ADJ	con-Lock	38cm	2557313	
5ANH02-FV	ArtiSential5 Porta-aghi Precise ADJ	no-Lock	38cm	2557312	
5ANH02S-LV	ArtiSential5 Porta-aghi Precise ADJ	con-Lock	30cm	2557315	
5ANH02S-FV	ArtiSential5 Porta-aghi Precise ADJ	no-Lock	30cm	2557314	


Descrizione del sistema:



No.	Descrizione/ Funzione	Spiegazione
1	Morso	Morso per presa di aghi e suture
2	Snodo distale morso	La connessione snodata del morso, che sostiene le branche del portagli e permette la regolazione e movimentazione delle stesse da un lato all'altro.
3	Snodo prossimale morso	La connessione snodata del morso che permette allo stesso di muoversi contemporaneamente allo snodo distale per articolare in basso e in alto il morso.
4	Stelo	Stelo di connessione tra gli snodi del morso e l'impugnatura.
5	Anelli di controllo	La sede è posta nell'impugnatura, l'operatore inserendovi le dita è in grado di controllare i movimenti di presa del morso, quindi apertura e chiusura dello stesso, inoltre mediante le strisce in velcro regolabili, tale controllo diviene maggiormente preciso grazie ad una maggiore aderenza delle dita agli anelli stessi.
6	Impugnatura	Combina la rotazione e la direzione del morso per ottenerne il controllo
7	Leva di blocco*	Fissa la posizione di presa e articolazione. *solo per i modelli dotati di leva di blocco.


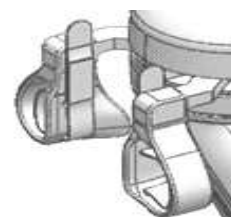


Misure:

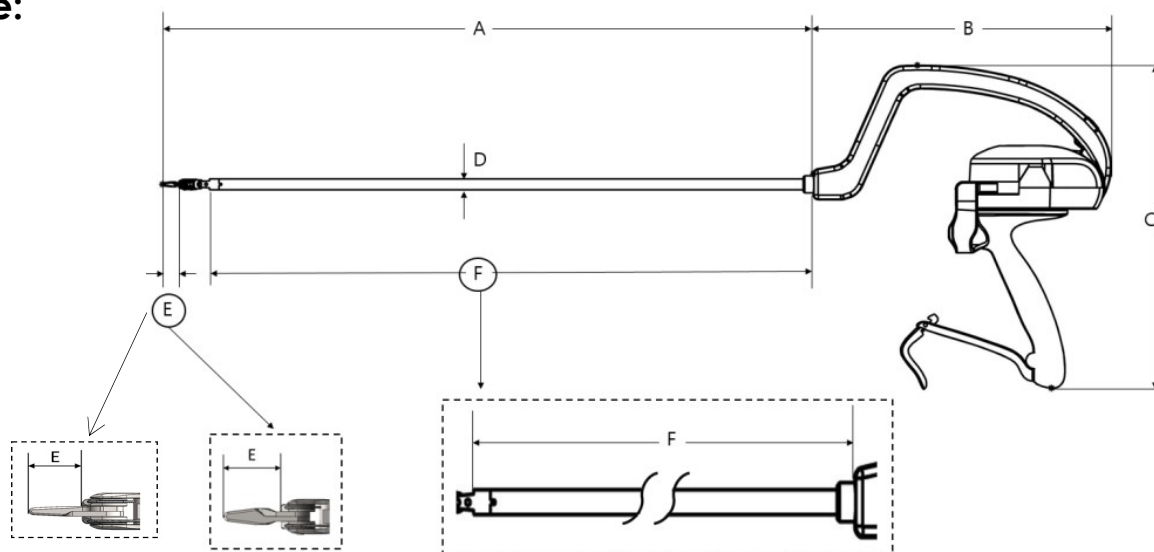





Codice	Specifiche	D Diametro mm	E Morso mm	F Stelo mm
ANH01-LV	Porta-Aghi Lock Adj	Ø8	10	380
ANH01S-LV				250
ANH01-FV	Porta-Aghi Adj no-Lock			380
ANH01S-FV				250
ANH02-LV	Porta-Aghi Precise Lock Adj		9	380
ANH02S-LV				250
ANH02-FV				380
ANH02S-FV				250
5ANH01-LV	Porta-Aghi Lock Adj	Ø5	10	376.5
5ANH01S-LV				296.5
5ANH01-FV	Porta-Aghi Adj no-Lock			376.5
5ANH01S-FV				296.5
5ANH02-LV	Porta-Aghi Precise Lock Adj		9	376.5
5ANH02S-LV				296.5
5ANH02-FV				376.5
5ANH02S-FV				296.5

Morsi:

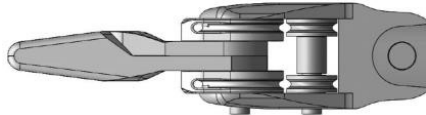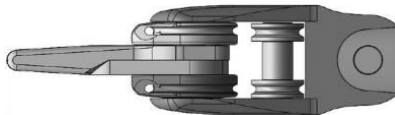ANH01-LV, ANH01-FV, ANH01x-LV, ANH01x-FV	ANH02-LV, ANH02-FV, ANH02x-LV, ANH02x-FV
5ANH01-LV, 5ANH01-FV, 5ANH01x-LV, 5ANH01x-FV	5ANH02-LV, 5ANH02-FV, 5ANH02x-LV, 5ANH02x-FV
	

Prestazioni e Movimenti:

Prestazioni	
Angolo di articolazione morso alto/basso	Angolo di articolazione morso destra/sinistra
$\pm 80^\circ$ o più	$\pm 80^\circ$ o più

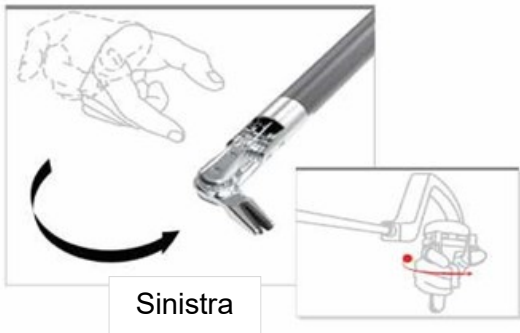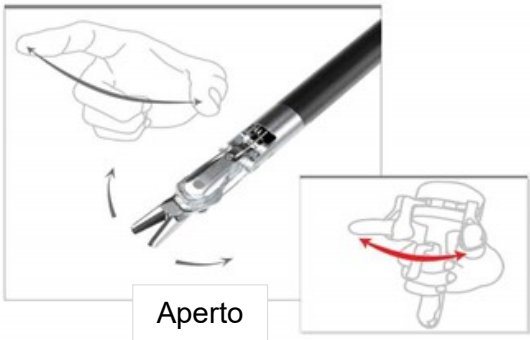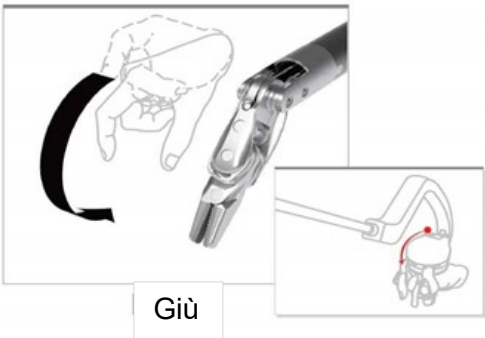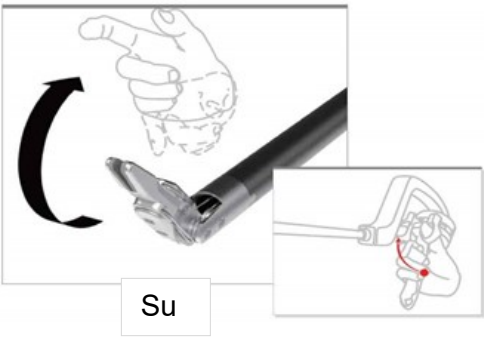

Materiali di composizione:	Ceramica/Vetro, Polimeri (Siliconi), Metalli (Acciaio inox, Argento)
Stoccaggio:	Dopo il confezionamento, i prodotti devono essere conservati nelle seguenti condizioni, evitare i gas corrosivi e conservarli in un luogo ben ventilato. Umidità relativa: meno dell'80%, Temperatura: 1°C~50°C
Sterilizzazione:	EO Ossido di Etilene
Durata della Sterilizzazione:	36 mesi
Marchio CE:	Nr. 024-MDR/QS-008 – Notify Body: 3EC International A.S. – 2265
Compatibilità:	Il prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di compatibilità, tossicità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici, ed è privo di lattice e ftalati.
Classe di Appartenenza:	Classe IIa – Reg. UE 2017/745
Istruzioni, avvertenze, controindicazioni ecc.:	Si rimanda alle istruzioni d'uso allegate
Confezione:	Singola-monouso, Box da 1 pz
Confezionamento:	Esterno: cartone Interno: TNT – polietilene
Produttore:	LivsMed Inc. 304, D-dong, 700, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repubblica di Corea (Yatap-dong Bundang TechnoPark) Tel: +82 70-4282-7652 Fax: +82 31-706-3211 Sito web: www.livsmmed.co.kr e-mail: livsmmed.info@gmail.com
Distributore Italia:	Joint Medical Srl Via Filippo Turati, 74 00015 - Monterotondo (RM) Tel. 06 39366066 Fax 06 25496205 info@jointmedical.it www.jointmedical.it